

ASPIRADOR NASAL

AN10



MANUAL DE USO



AN10

ESCANEA EL
CÓDIGO QR, Y
ACCEDÉ A TODO
EL CONTENIDO
DEL AN10



ANTES DE UTILIZAR EL
EQUIPO ES OBLIGATORIO
LEER EL MANUAL DE USO.

Centro de descargas SILFAB:
descargas.silfab.com.ar



Ideal para
tu bebé

**SILFAB**

01. USO PREVISTO

El aspirador nasal está diseñado para eliminar secreciones nasales y mucosidad en personas, principalmente en bebés y niños. Ayuda a despejar las fosas nasales de forma rápida y suave. Está diseñado únicamente para uso hogareño.

02. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- No utilice el dispositivo en personas con hemorragia nasal o en otros orificios que no sean los nasales.
- No utilice el producto en animales.
- Utilice el dispositivo únicamente como se describe en las instrucciones. El incumplimiento de las advertencias puede provocar traumatismos mecánicos como hemorragias nasales, sangrado de las mucosas, molestias o dolor.
- Este producto es apto únicamente para uso hogareño y no para fines médicos o comerciales.
- El producto sólo se puede utilizar para el fin para el que fue diseñado y de la forma especificada en las instrucciones de uso. Cualquier uso indebido puede resultar peligroso. El fabricante e importador no se hace responsable de los daños resultantes de un uso indebido o incorrecto.
- La limpieza y el uso no deben ser realizados por niños.
- Si surge alguna molestia o dolor mientras el dispositivo está en funcionamiento, deje de usarlo.
- No utilice en personas con lesiones agudas en la cabeza, la cara o el cuello o trastornos de la coagulación o de la sangre.
- Limpie las puntas de silicona antes de cada uso.
- No ejerza fuerza excesiva al insertar las puntas de silicona en la nariz.
- No utilice piezas adicionales que no sean parte de este producto.
- No permita que entre líquido en el dispositivo en ninguna circunstancia.
- Durante la operación, asegúrese de que el bebé o niño no contenga la respiración, cierre la boca ni trague saliva, ya que esto podría crear un vacío que podría dañar el tímpano.
- Si el niño tiene alguna afección nasal, consulte a su médico antes de utilizar el aspirador.
- Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños (para evitar riesgo de asfixia). Los niños no deben jugar con el producto.
- Los niños, las personas con capacidades físicas o mentales reducidas, las personas sin expe-

riencia o conocimientos pueden utilizar el dispositivo en un entorno seguro si están supervisados y comprenden los riesgos que implica.

- Antes de utilizar el dispositivo, asegúrese de que no presente daños visibles ni en sus accesorios. En caso de duda, no utilice el dispositivo y póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio de atención al cliente indicado.
- Si el producto no funciona correctamente, deje de usarlo inmediatamente.
- No abra, modifique ni repare nunca el dispositivo, ya que de lo contrario no se puede garantizar su correcto funcionamiento. El incumplimiento de esta instrucción puede resultar peligroso y también invalidará la garantía.
- Proteja el producto de golpes, humedad, suciedad, cambios bruscos de temperatura y luz solar directa.
- Si el producto se ha caído, ha estado expuesto a altos niveles de humedad o ha sufrido cualquier otro daño, no debe volver a utilizarse. En caso de duda, póngase en contacto con un servicio técnico oficial.

03. INSTRUCCIONES DE USO

03.1 Partes del producto


- 1a. Punta en forma de calabaza (1 unidad).
- 1b. Punta en forma de embudo (1 unidad).
- 1c. Punta ancha (2 unidades).
- 1d. Punta ancha y extendida (1 unidad).
2. Contenedor (depósito).
3. Botones de succión (baja / alta).
4. Tapa del porta pilas.
5. Bloqueo / desbloqueo giratorio del contenedor.



03.2 Colocación de las pilas

⚠ Importante: Retire las pilas del producto si el mismo no va a ser utilizado por un tiempo prolongado (más de 3 meses), para evitar daños al dispositivo debido a posibles fugas de las pilas.

- A.** Retire la tapa del porta pilas, deslizándola hacia abajo.
- B.** Inserte dos pilas AA, respetando la polaridad indicada en el compartimiento de las pilas.
- C.** Coloque la tapa del porta pilas deslizándola hacia

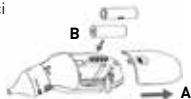

03.3 Modo de uso

⚠ Importante:

- No utilice el producto en otros orificios que no sean los nasales.
- No utilice el dispositivo en personas con hemorragia nasal.
- Verifique antes de usar que el contenedor no esté lleno.

A. Verifique que el aspirador tenga colocadas las pilas, caso contrario colóquelas según el punto 03.2.

B. Seleccione la punta según su necesidad:

PUNTA EN FORMA DE CALABAZA

Hasta 2 años, para narices pequeñas.

PUNTA EN FORMA DE EMBUDO

Hasta 2 años, para obstrucciones superficiales y visibles.

PUNTA ANCHA

Más de 2 años, para obstrucciones profundas.

PUNTA ANCHA EXTENDIDA

Más de 2 años, para obstrucciones de consistencia espesa.

Coloque la misma en el extremo del contenedor, verificando su correcta colocación.



C. Inserte la punta del aspirador suavemente en la fosa nasal, de forma segura y cómoda.

D. Elija entre las dos opciones de succión (alta o baja). El dispositivo funciona cuando se mantiene presionado el botón elegido.



Importante: No permita que las secreciones nasales sobrepasen el nivel máximo del contenedor.



04. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

⚠ Importante:

- Limpie el aspirador después de cada uso, de lo contrario podría obstruirse.
- Las puntas de silicona y el depósito se pueden desinfectar con alcohol.

A. Gire el contenedor junto con la punta utilizada.

B. Tire suavemente de la punta, para desprenderla del contenedor.

C. Limpie ambas partes con agua o con agua y jabón (suave). No utilice ningún producto de limpieza agresivo.

D. Coloque el contenedor y la punta sobre un paño absorbente y séquelos completamente.

E. Limpie la unidad principal únicamente con un paño limpio y seco. No utilice productos de limpieza corrosivos, soluciones o bencenos.

Importante: La unidad principal no debe enjuagarse con agua, ni sumergirse en agua.



05. MANTENIMIENTO

Para prolongar la vida útil del aspirador nasal se recomienda:

- Guardar el producto alejado de la luz solar, el polvo y/o la humedad.
- No guardar si alguna de las partes están mojadas y/o húmedas.
- Retirar las pilas si el producto no va a ser utilizado por más de 3 meses.
- Revisar con frecuencia el estado general del aspirador. En caso de notar algún desperfecto, no usarlo y ponerse en contacto con un Servicio Técnico Oficial (STO).

06. DESCARTE DEL EQUIPO

Información acerca de la eliminación por parte del usuario de equipos con residuos eléctricos y electrónicos:

- No desechar este producto, como así tampoco ninguno de sus accesorios, de la misma forma que lo haría con los residuos generales de su hogar. Para evitar posibles daños al medioambiente o a la salud humana debido a la elimi-

nación incontrolada de residuos, se aconseja reciclarlo responsablemente para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales.

- Para su descarte consultar las reglamentaciones vigentes en su región y/o, en su defecto, la reglamentación del centro de salud al cual pertenece.

07. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SKU REF		AN10
Modelo		BD3370
Marca		SILFAB
Alimentación nominal		2 pilas AA (1.5Vcc)
Niveles de succión (aspiración)	Baja	≥ 200 mmHg
	Alta	≥ 350 mmHg
Puntas	Material	Silicona
	Cantidad	5 unidades
Duración aproximada de las pilas		1000 operaciones
Dimensiones (con una punta)		6 cm / 6 cm / 15 cm (largo / ancho / alto)
Peso (con una punta y pilas)		190 g
Condiciones de uso	Temperatura	10 °C ~ 40 °C
	Humedad	15% ~ 93% (HR sin condensación)
	Presión	70 kPa ~ 106 kPa
Condiciones de almacenamiento y transporte	Temperatura	-20 °C ~ 55 °C
	Humedad	15% ~ 93% (HR sin condensación)
	Presión	70 kPa ~ 106 kPa

08. DEFINICIÓN DE SÍMBOLOS

 Fabricado en.	 Advertencia.	 No apilar más de "n" cajas.
 Fabricado por.	 No desechar con la basura doméstica.	 Límites de humedad.
 Lote.	 Este lado arriba.	 Límites de presión atmosférica.
 Código de referencia.	 Frágil. Manipúlese con cuidado.	 Límites de temperatura.
 Es obligatorio leer el manual de uso.	 Manténgase seco y protegido de la humedad.	 Mantener alejado de la luz solar
 Corriente continua.		

09 GARANTÍA

- El período de garantía a partir de la fecha de compra por el usuario para el Aspirador Nasal es de 1 año. Esta garantía cubre la reparación o el reemplazo de cualquier pieza que presente fallas en condiciones normales de uso, o cualquier defecto de fabricación, siempre que se utilice de acuerdo con las instrucciones proporcionadas con el producto.

Causas de Caducidad de la Garantía:

- El producto evidencia golpes, roturas, caídas, rayaduras, humedad o cualquier daño no atribuible al desgaste natural en el uso.
- El producto recibe un trato inadecuado.
- No se cumple con las pautas de uso indicadas en este manual.
- Se evidencia intento de reparación o desarmado del producto por personas no autorizadas.
- El modelo adquirido es inadecuado o su uso es ajeno al destinado.
- La garantía no es acompañada de la factura o ticket de compra.

Importa y distribuye SILVESTRIN FABRIS S.R.L.
Av. Del Barco Centenera 3481 (C1437ACG),
C.A.B.A, Argentina
CUIT N° 30-59896009-3
Producto de venta libre.

MADE IN CHINA



Garantiza SILVESTRIN FABRIS S.R.L.

- Por **problemas técnicos**, consultanos a:
Mail: postventa@silfab.com.ar.

- Para otras **consultas o reclamos** a:
Mail: sac@silfab.com.ar  WhatsApp: (+54) 9 11 3417-0606

- **Servicios Técnicos Oficiales** y accesorios:
www.silfab.com.ar

¡SEGUINOS!



Las imágenes son meramente ilustrativas.
Los productos podrán sufrir modificaciones en sus accesorios y/o colores sin previo aviso.