

NEBULIZADOR A PISTÓN 2^{EN} 1

DUOVENTO NP20 DUO



Ideal para
tu bebé

MANUAL DE USO RÁPIDO



**ANTES DE UTILIZAR EL EQUIPO ES
OBLIGATORIO LEER EL MANUAL DE USO.**

Centro de descargas SILFAB:
descargas.silfab.com.ar



NP20 DUO

ESCANEA EL
CÓDIGO QR, Y
ACCEDÉ A TODO
EL CONTENIDO
DE TU
PRODUCTO.




SILFAB

La información presente en este documento
debe complementarse con el manual de uso
extendido que se encuentra en la web.

01 CONTENIDO DEL PACKAGING



UNIDAD PRINCIPAL



MANUAL DE
USO RÁPIDO



PIPETA ASPIRADORA



REPUESTOS FILTRO
(Elemento filtrante)

⚠ Todas las partes componentes son requeridas para el correcto funcionamiento del equipo. No usar ningún otro accesorio que no haya sido adquirido al fabricante. Los materiales que entran en contacto con el paciente o usuario son no tóxicos.

Accesorios Kit de Nebulización (P62)



MÁSCARA
GRANDE (P59)



MÁSCARA
CHICA (P59)



MANGUERA
PLÁSTICA (P52)



ADAPTADOR
BUCAL (P66)



PIPETA NEBULIZADORA
(P71)

1.1 PARTES DE TU NEBULIZADOR

Unidad principal

LLAVE DE
ENCENDIDO

CABLE DE
ALIMENTACIÓN

PORTA
PIPETA

Filtro de aire.

Porta filtro.

RA.

Elemento filtrante.

Pipeta nebulizadora

Conexión a
máscara o
adaptador
bucal.

Conexión a
manguera.

Cuerpo
superior.

Cuerpo
inferior.

Pipeta aspiradora

Orificio de
aspiración.

Conexión a
manguera.

Punta.

Cuerpo.

02 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Importante:

- Antes de proceder con la limpieza, desinfección o mantenimiento, asegurarse de desconectar la unidad principal de la red de alimentación eléctrica.
- Los accesorios (máscara grande, máscara chica, adaptador bucal, pipeta nebulizadora, manguera plástica y pipeta aspiradora) no deben hervirse.
- No higienizar las máscaras con sustancias tales como hipoclorito de sodio (lavandina) ya que el PVC se oxida con el cloro.
- Desinfectar el equipo después del último tratamiento del día.

A UNIDAD PRINCIPAL

- Repasar la superficie de la unidad principal con un paño limpio.
- Luego desinfectar el equipo con un paño limpio embebido en alcohol etílico al 70%.
- Secar con un paño limpio.

B KIT DE NEBULIZACIÓN

- Desconectar la manguera de la pipeta nebulizadora junto con el resto de los accesorios.
- Descartar el residuo de solución que quedó sin nebulizar y lavar todas las partes con agua tibia.
- Dejar secar al aire libre o secar con toallas de papel limpias.

Desinfección:

- En un recipiente prepare una solución compuesta por una parte de vinagre y tres partes de agua tibia.
- Sumergir ambas partes de la pipeta nebulizadora, las máscaras, el adaptador bucal, y la manguera plástica, durante 10 minutos.
- Lavar todo con agua tibia.
- Dejar secar al aire libre o secar con toallas de papel limpias.

C PIPETA ASPIRADORA

- Desconectar la manguera de la pipeta aspiradora y retirar el pico del cuerpo.
- Descartar cuidadosamente toda la mucosidad.
- Lavar ambas partes con agua tibia, evitando que entre agua en el orificio del contenedor, agitar el cuerpo de la pipeta aspiradora para eliminar restos de agua de su interior.
- Dejar secar al aire libre o secar con toallas de papel limpias.

Desinfección:

- Repasar con un paño limpio embebido con alcohol etílico al 70% todas las superficies, principalmente el contenedor y la punta de la pipeta aspiradora.
- Dejar secar al aire libre o secar con toallas de papel limpias.



Atención: NO sumergir la Pipeta Aspiradora en agua y/o otra solución.

IMPORTANTE: En caso de tener que ensamblar (montar) la pipeta aspiradora, leer el "punto 9.2 del manual de uso: AG-MUNPD1 (versión vigente)"

A NEBULIZACIÓN CON PIPETA NEBULIZADORA



Importante:

- El kit de nebulización es recomendado para uso personal, para evitar una posible contaminación cruzada.
- Antes de comenzar el proceso de nebulización lavar sus manos.
- En caso de utilizar el equipo por primera vez, desinfectarlo siguiendo los pasos descriptos en el punto 02.
- Colocar la unidad principal en una mesa o superficie plana y estable, cercana a un tomacorriente (a una distancia no mayor a 1.5 metros). No usar estando en el piso o apoyado sobre la cama.
- Asegúrese de poder alcanzar los controles y la ficha del cable de alimentación fácilmente estando sentado.
- Durante el proceso de nebulización la pipeta nebulizadora debe permanecer en posición vertical o levemente inclinada (un ángulo no mayor a 10° con respecto al eje vertical) para no afectar el correcto funcionamiento.
- Utilizar ÚNICAMENTE la PIPETA NEBULIZADORA.



Para más información, leer el manual de uso.

Preparación de la medicación.

- Colocar dentro de la pipeta nebulizadora la solución a nebulizar en las proporciones indicadas por su profesional médico*.

(*): La indicación de la pipeta nebulizadora está dada en mililitros (ml) y es solo orientativa.

Nota: Este equipo no viene provisto con dosificador.



 Atención: NO superar el nivel máximo de 10ml.

Preparación del equipo.

- Conectar la pipeta nebulizadora y los demás accesorios a la unidad principal.

Proceso de nebulización.

- Enchufar y encender la unidad principal.
- Realizar el proceso de nebulización de acuerdo a lo indicado por el médico.
- Al finalizar la nebulización, apagar la unidad principal y desenchufar.

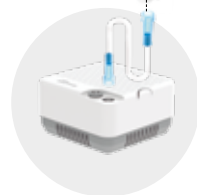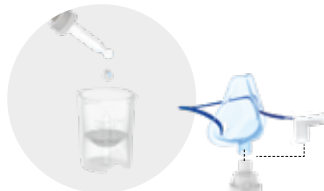

Nunca realizar una nebulización por más de 15 minutos. En caso de requerirlo se deberá aguardar por lo menos 45 minutos antes de encender la unidad nuevamente.



Modo de funcionamiento: 15 min. encendido-45 min. apagado.

B ASPIRACIÓN DE MUCOSIDAD CON PIPETA ASPIRADORA

⚠ Importante:

- La pipeta aspiradora es recomendada para uso personal, para evitar una posible contaminación cruzada.
- Antes de comenzar el proceso de aspiración de mucosidad lavar sus manos.
- En caso de utilizar el equipo por primera vez, desinfectarlo siguiendo los pasos descritos en el punto 02.
- Colocar la unidad principal en una mesa o superficie plana y estable, cercana a un tomacorriente (a una distancia no mayor a 1.5 metros). No usar estando en el piso o apoyado sobre la cama.
- Asegúrese de poder alcanzar los controles y la ficha del cable de alimentación fácilmente estando sentado.
- Durante el proceso de aspiración la pipeta aspiradora debe permanecer en posición vertical o levemente inclinada (un ángulo no mayor a 10° con respecto al eje vertical) para no afectar el correcto funcionamiento.
- Utilice ÚNICAMENTE la PIPETA ASPIRADORA.
- NO utilizar si el paciente tiene lastimados los orificios nasales, y/o hay presencia de sangre.

Preparación del equipo.


- Conectar la manguera a la pipeta aspiradora y luego el otro extremo de la manguera a la unidad principal en el pico de salida de aire.

Proceso de aspiración.

- Enchufar y encender la unidad principal.
- Realizar el proceso de aspiración de mucosidad introduciendo levemente la punta de la pipeta aspiradora en uno de los orificios nasales.
- Al finalizar la aspiración, apagar la unidad principal y desenchufar.

⚠ Nunca realizar una aspiración por más de 15 minutos. En caso de requerirlo se deberá aguardar por lo menos 45 minutos antes de encender la unidad nuevamente.

⌚ Modo de funcionamiento: 15 min. encendido-45 min. apagado.

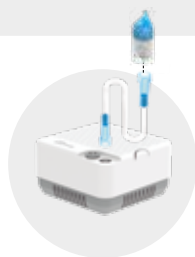

Nebulizador - Aspirador nasal a pistón modelo NP20 DUO, Marca Silfab.
Producto Autorizado por la ANMAT PM-97-105
Director técnico: Bioing. Diego Fontana.
Matrícula COPITEC: 5611.
USO SIN PRESCRIPCIÓN.

EMBAJADORES DEL CAMBIO



SILFAB

• Por **problemas técnicos**, consultanos a:
Mail: postventa@silfab.com.ar.

• Para otras **consultas o reclamos** a:
Mail: sac@silfab.com.ar  WhatsApp: [+54] 9 11 3417-0606

• **Servicios Técnicos Oficiales** y accesorios:
www.silfab.com.ar

¡SEGUINOS!



AG-MURNP20 DUO v02 [última revisión agosto 2026]

Las fotografías y gráficas son meramente ilustrativas. Los productos podrán sufrir modificaciones en sus accesorios y/o colores sin previo aviso.

 **SILVESTRIN FABRIS S.R.L. INDUSTRIA ARGENTINA**
• Av. Del Barco Centenera 3481 [C1437ACG] C.A.B.A. Argentina.
☎ [+54-11] 5368-2525



AUTORIZADO POR
